




# NANOCOLOR® Rechteckküvettentest Zink

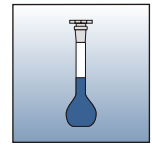


Art.-Nr.	Küvette	Messbereich	Methode	Wellenlänge
918 95	10 mm	0,1 - 3,0 mg/L Zn <sup>2+</sup>	(1)951	620 nm
	50 mm	0,02 - 1,50 mg/L Zn <sup>2+</sup>		

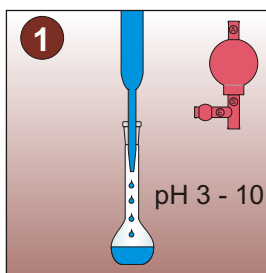


20 mL Probe

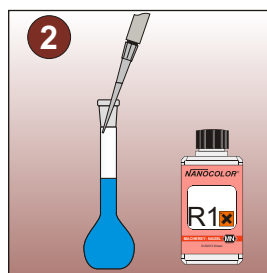


1,0 mL R1

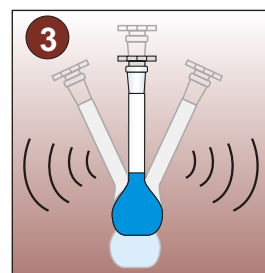


Mischen

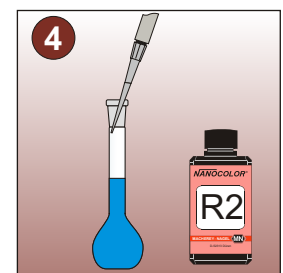


1,0 mL R2

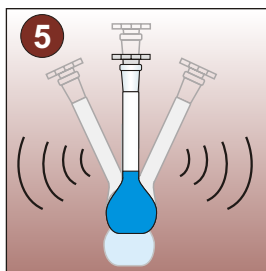


Mischen

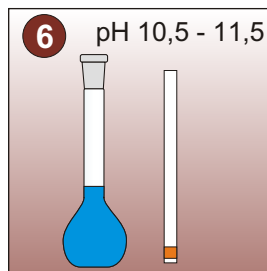


pHKontrolle

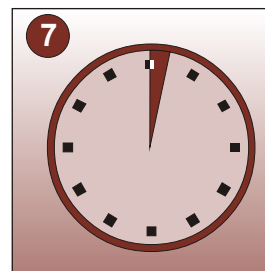


2'00 min

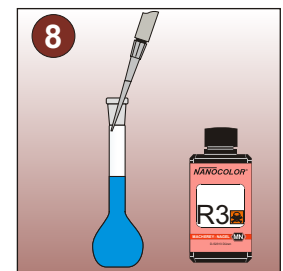


1,0 mL R3

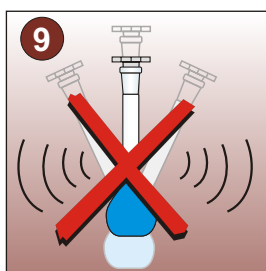


Nicht mischen

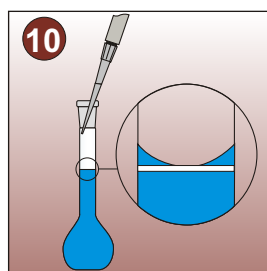


Mit dest. Wasser  
auf 25 ml auffüllen

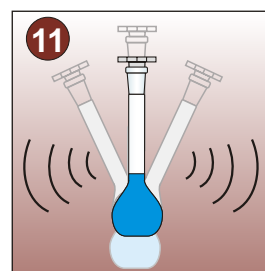


Mischen

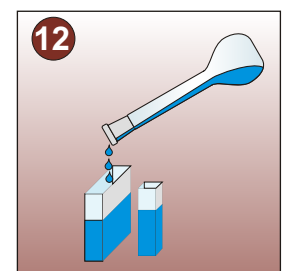


Spülen und füllen

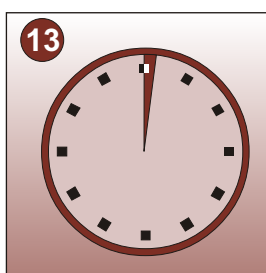


1'00 min

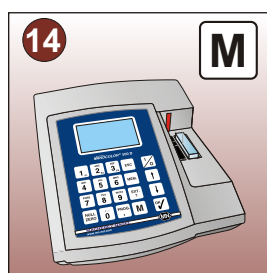

Messung

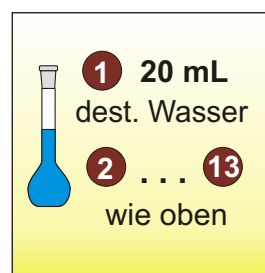

Ansatz NULL

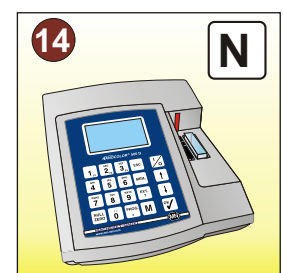

NULL-Messung