

# Resultados óptimos con CHROMAFIL®

Filtros de alta calidad para jeringas, fabricados por el único especialista alemán en papeles filtrantes y en cromatografía

Cromatografía

## 3 razones a favor de CHROMAFIL®

- Carcasa de PP, resistente a los disolventes y sellada con ultrasonido
- El más moderno sistema de fabricación según estándares de calidad certificados con la norma ISO 9001
- Gran variedad de membranas, tanto para usos especiales como también para usos generales



### Nuestros favoritos más buscados:

#### CHROMAFIL® RC (15 mm Ø) ¡NUEVO!

##### Membrana hidrófoba de celulosa regenerada

- baja adsorción
- muy pequeño volumen no utilizable: 120 µl o 12 µl (para 25/15 mm Ø)
- prácticamente sin valor blanco a deducir

Recomendada para:

- soluciones polares y semipolares

#### CHROMAFIL® PET

##### La membrana de poliéster universal y única

Recomendada para:

- filtración de medios agresivos
- prácticamente todas las soluciones polares a no polares; "el" filtro para HPLC
- disponible para soluciones con sustancias en suspensión, con membrana de fibra de vidrio
- especialmente apropiado para análisis de TOC/DOC (total organic carbon/dissolved organic carbon)

#### CHROMAFIL® PTFE

##### La resistente membrana de polytetrafluoroethylene


Estable en relación con:

- disolventes de todo tipo
- ácidos y bases

## ¿Desea conocer más sobre CHROMAFIL®?

Entonces póngase en contacto con nosotros, o infórmese en nuestro sitio [www.mn-net.com](http://www.mn-net.com)

Solicite además el folleto "CHROMAFIL®" – donde tendrá una visión general de todos los tipos principales de membranas y sus correspondientes resistencias a los disolventes.

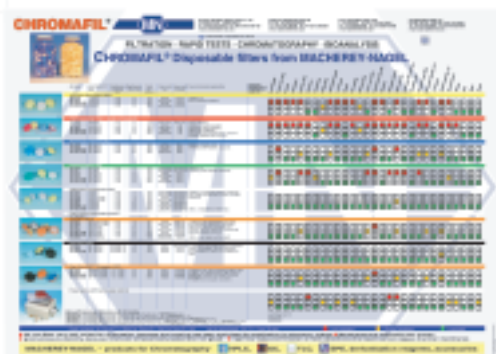

Su socio en cromatografía desde hace más de 40 años

[www.mn-net.com](http://www.mn-net.com)

**MACHEREY-NAGEL**

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Neumann-Neander-Str. 6-8 · D-52355 Düren · Alemania

Alemania

e internacional:

Tel.: +49 (0) 24 21 96 90

Fax: +49 (0) 24 21 96 91 99

e-mail: [sales-de@mn-net.com](mailto:sales-de@mn-net.com)

Suiza:

MACHEREY-NAGEL AG

Tel.: +41 (0) 62 388 55 00

Fax: +41 (0) 62 388 55 05

e-mail: [sales-ch@mn-net.com](mailto:sales-ch@mn-net.com)

Francia:

MACHEREY-NAGEL EURL

Tel.: +33 (0) 3 88 68 22 68

Fax: +33 (0) 3 88 51 76 88

e-mail: [sales-fr@mn-net.com](mailto:sales-fr@mn-net.com)

USA:

MACHEREY-NAGEL Inc.

Tel.: +1 610 559 98 48

Fax: +1 610 559 98 78

e-mail: [sales-us@mn-net.com](mailto:sales-us@mn-net.com)



# Resultados óptimos con CHROMAFIL®

Filtros de alta calidad para jeringas, fabricados por el único especialista alemán en papeles filtrantes y en cromatografía

## Calidad "Made in Germany"

### Información para realizar pedidos

Tipo	Membrana Ø de los poros	Contenido del paquete	Art. N°	Contenido del paquete	Art. N°	Carcasa Parte superior/Parte inferior	
<b>Celulosa Regenerada (RC)</b>			<b>¡NUEVO!</b>				
RC 20-15 MS*	0,2	15	100	729036		amarillo/azul	
RC 45-15 MS*	0,45	15	100	729037		incoloro/azul	
RC 20-25	0,2	25	100	729030	400	729030.400	amarillo/azul
RC 45-25	0,45	25	100	729031	400	729031.400	incoloro/azul
<b>Poliéster (PET)</b>							
PET 20-15 MS*	0,2	15	100	729022			amarillo/anaranjado
PET 45-15 MS*	0,45	15	100	729023			incoloro/anaranjado
PET 20-25	0,2	25	100	729021	400	729021.400	amarillo/anaranjado
PET 45-25	0,45	25	100	729020	400	729020.400	incoloro/anaranjado
<b>Polytetrafluorethylene (PTFE)</b>							
O 20-15 MS*	0,2	15	100	729008			amarillo/incoloro
O 45-15 MS*	0,45	15	100	729009			incoloro/incoloro
O 20-25	0,2	25	100	729007	400	729007.400	amarillo/incoloro
O 45-25	0,45	25	100	729005	400	729005.400	incoloro/incoloro
<b>Acetato de celulosa (CA)</b>							
CA-20/25	0,20	25	100	729026	400	729026.400	amarillo/rojo
CA-45/25	0,45	25	100	729027	400	729027.400	incoloro/rojo
<b>Poliamida/nailon</b>							
AO-20/3	0,2	3	100	729010			incoloro/incoloro
AO-45-3	0,45	3	100	729011			incoloro/incoloro
AO-20/25	0,20	25	100	729012	400	729012.400	amarillo/verde
AO-45/25	0,45	25	100	729013	400	729013.400	incoloro/verde

\* MS = Conexión para *mini-spike* (punta pequeña) en la salida del filtro



Suministrado por

**Su socio en cromatografía  
desde hace más de 40 años**

[www.mn-net.com](http://www.mn-net.com)

**MACHEREY-NAGEL**

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Neumann-Neander-Str. 6-8 · D-52355 Düren · Alemania

Alemania  
e internacional:

Tel.: +49 (0) 24 21 96 90  
Fax: +49 (0) 24 21 96 91 99  
e-mail: sales-de@mn-net.com

Suiza:  
MACHEREY-NAGEL AG

Tel.: +41 (0) 62 388 55 00  
Fax: +41 (0) 62 388 55 05  
e-mail: sales-ch@mn-net.com

Francia:  
MACHEREY-NAGEL EUROL

Tel.: +33 (0) 3 88 68 22 68  
Fax: +33 (0) 3 88 51 76 88  
e-mail: sales-fr@mn-net.com

USA:  
MACHEREY-NAGEL Inc.

Tel.: +1 610 559 98 48  
Fax: +1 610 559 98 78  
e-mail: sales-us@mn-net.com

