

# PEROXTESMO KO

es

## Papel de prueba para la determinación de Peroxidasa

(en la industria de alimentación): usado sólo por personal debidamente calificado.

### Presentación:

100 papeles de 15 x 15 mm

### Reacción del color:

PEROXTESMO KO reacciona con Peroxidasa para producir manchas azules contra fondo blanco.

### Precauciones de seguridad:

Papel reactivo contiene o-Tolidina clorhidrato 0,10–2,50 % CAS 612-82-8. PELIGRO puede causar cáncer. No manipule la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consulte a un médico. Guardar bajo llave. Si desea información más detallada, solicite una ficha de datos de seguridad (*o descárguela en [www.mn-net.com/MSDS](http://www.mn-net.com/MSDS)*).

### Método de aplicación:

Aplicar una gota de la solución a probar, tal como un zumo o jugo vegetal, al papel o aplicar éste al área cortada de una planta a comprobar, sujetándolo de una manera firme contra ella. Cualquier coloración azul ó verde azulada que se produzca en dos minutos es indicativa de la presencia de peroxidasa.

No tocar el papel con los dedos.

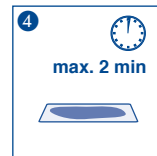
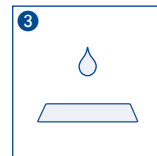
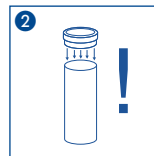
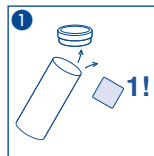
### Eliminación:








Elimine los papeles usados en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.

### Especificidad:

PEROXTESMO KO es específico para la determinación de peroxidasa. La utilización de PEROXTESMO KO solamente puede considerarse como una prueba preliminar.

El papel reactivo adquiere con el tiempo una coloración marrón (6 meses) y podrá usarse siempre que se distinga el color azul de la reacción.



<b>REF</b>	Artikelnummer / Item number / Référence produit / Referencia / Artikelnummer / Numero di catalogo / Numer artykułu	<b>LOT</b>	Chargencode / Batch identification / Numéro de lot / Código de lote / Productienummer / Codice del lotto / Numer partii
	Achtung! / Warning! / Attention! / ¡Atención! / Let op! / Attenzione! / Uwaga!		Verwendbar bis / Use by / À utiliser avant / Fecha de caducidad / Te gebruiken tot / Utilizzare entro (anno / mese) / Przydatność do użycia
	Temperaturbegrenzung / Permitted storage temperature range / Limites de température / Límites de temperatura / Temperatuurbegrenzing / Limite de temperatura / Ograniczenie temperatury		Trocken aufbewahren / Store in a dry place / Conserver au sec / Mantener seco / Op een droge plaats bewaren / Mantenere asciutto / Przechowywać w suchym miejscu
	Gebrauchsanweisung beachten / Please read instructions for use / Respecter les instructions d'utilisation / Obsérvense las instrucciones de uso / Lees de bijsluiting / Consultare le istruzioni per l'uso / Przestrzegać instrukcję użycia		Packung geschlossen halten / Keep container closed / Refermer la boîte / Mantenga el envase cerrado / Verpakking gesloten houden / Conservare la confezione chiusa / Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
	Ausreichend für <n> Prüfungen / Contains sufficient for <n> tests / Contenu suffisant pour <n> tests / Contenido suficiente para <n> tests / Voldoende voor <n> tests / Contenuto sufficiente per <n> test / Wystarczająco dla kontroli <n>		