

Papel de prueba para la determinación semi-cuantitativa de cloruros, bromuros y yoduros

SALTESMO resulta especialmente adecuado para la verificación rápida de concentraciones de los iones halógenos. Podrán controlarse rápidamente determinados límites de concentraciones y en su caso, reconocerse las superaciones por exceso o defecto de las mismas.

Reacción al color:


SALTESMO cambia de color por la acción de los cloruros, bromuros y yoduros de marrón rojizo hacia el amarillo. El tamaño de la zona circular en la que viró el color corresponde a la concentración total de cloruros, bromuros y yoduros.

Instrucciones de uso:

1. Saque la tirita de prueba.
2. ¡Cierre la caja inmediatamente después de forma que quede impermeable a la luz!
3. Perfore la tirita de prueba redonda, con la aguja acompañantes, **exactamente en el centro!**
4. Sumerja el papel por 1 minuto en la solución a analizar.
5. A más tardar después de 2 minutos, después de haber quedado saturado el papel de prueba, sáquelo de la solución de prueba y compare el tamaño de la zona decolorada con la escala. La concentración podrá leerse en g/L NaCl, KCl, NaBr o KI.

En caso de concentraciones demasiado altas deberá diluirse la solución de prueba. Después de la lectura deberá tenerse en cuenta la dilución.

Los iones de fluoruros no serán señalados.

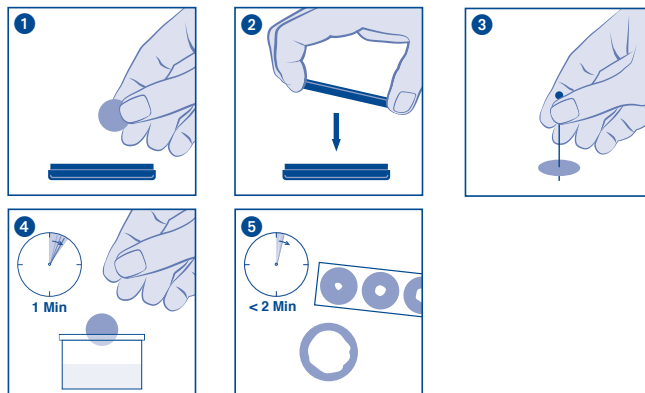

REF	Artikelnummer / Item number / Référence produit / Referencia / Artikelnummer / Numero di catalogo / Numer artykułu	LOT	Chargencode / Batch identification / Numéro de lot / Código de lote / Productienummer / Codice del lotto / Numer partii
	Achtung! / Warning! / Attention! / ¡Atención! / Let op! / Attenzione! / Uwaga!		Verwendbar bis / Use by / À utiliser avant / Fecha de caducidad / Te gebruiken tot / Utilizzare entro (anno / mese) / Przydatność do użycia
	Temperaturbegrenzung / Permitted storage temperature range / Limites de température / Limites de temperatura / Temperaturbegrenzung / Limite de temperatura / Ograniczenie temperatury		Trocken aufbewahren / Store in a dry place / Conserver au sec / Mantener seco / Op een droge plaats bewaren / Mantenere asciutto / Przechowywać w suchym miejscu
	Gebrauchsanweisung beachten / Please read instructions for use / Respecter les instructions d'utilisation / Obsérvense las instrucciones de uso / Lees de bijsluiter / Consultare le istruzioni per l'uso / Przestrzegać instrukcję użycia		Packung geschlossen halten / Keep container closed / Refermer la boîte / Mantenga el envase cerrado / Verpakking gesloten houden / Conservare la confezione chiusa / Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
	Ausreichend für <n> Prüfungen / Contains sufficient for <n> tests / Contenu suffisant pour <n> tests / Contenido suficiente para <n> tests / Voldoende voor <n> tests / Contenuto sufficiente per <n> test / Wystarczająco dla kontroli <n>		