

PEROXTESMO KO

it

Cartine rivelatrici per la determinazione della perossidasi

(nell'industria dei generi alimentari): Solo per applicatori professionali

Contenuto:

100 cartine rivelatrici, 15 x 15 mm

Viraggio (variaz. di colore):

La perossidasi provoca macchie blu con fondo bianco sulla Cartina PEROXTESMO KO.

Consigli di sicurezza:

Cartine indicatrici contiene o-Tolidina cloridrato 0,10–2,50 % CAS 612-82-8. PERICOLO può provocare il cancro. Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. Conservare sotto chiave. Per informazioni dettagliate, richiedi una scheda di dati di sicurezza (o la scarichi da www.mn-net.com/MSDS).

Istruzioni per l'uso:

Versare una goccia del liquido da analizzare, p. es. succo di verdura, sulla Cartina rivelatrice, oppure premere con forza la superficie tagliata della pianta contro la Cartina. Ogni colorazione dal blu al blu-verde, avvenuta nell'ambito di 2 minuti, indica la presenza della perossidasi.

Non toccare con le dita la Cartina rivelatrice.

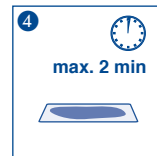
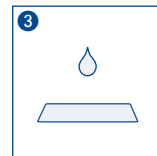
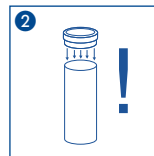
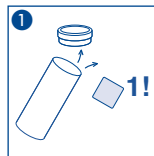
Smaltimento:








Smaltire le cartine rivelatrice usate con i rifiuti speciali.

Specificità e conservabilità:

L'uso specifico previsto per PEROXTESMO KO è l'identificazione della perossidasi. L'identificazione mediante PEROXTESMO KO può essere considerata soltanto come un'analisi preliminare.

Con il passare del tempo (6 mesi) la cartina rivelatrice prende una colorazione marrone e pertanto può essere usata solo finché la colorazione blu prodotta dalla reazione è ancora chiaramente visibile.



REF	Artikelnummer / Item number / Référence produit / Referencia / Artikelnummer / Numero di catalogo / Numer artykułu	LOT	Chargencode / Batch identification / Numéro de lot / Código de lote / Productienummer / Codice del lotto / Numer partii
	Achtung! / Warning! / Attention! / ¡Atención! / Let op! / Attenzione! / Uwaga!		Verwendbar bis / Use by / À utiliser avant / Fecha de caducidad / Te gebruiken tot / Utilizzare entro (anno / mese) / Przydatność do użycia
	Temperaturbegrenzung / Permitted storage temperature range / Limites de température / Limites de temperatura / Temperatuurbegrenzing / Limite de temperatura / Ograniczenie temperatury		Trocken aufbewahren / Store in a dry place / Conserver au sec / Mantener seco / Op een droge plaats bewaren / Mantenere asciutto / Przechowywać w suchym miejscu
	Gebrauchsanweisung beachten / Please read instructions for use / Respecter les instructions d'utilisation / Obsérvense las instrucciones de uso / Lees de bijsluiter / Consultare le istruzioni per l'uso / Przestrzegać instrukcję użycia		Packung geschlossen halten / Keep container closed / Refermer la boîte / Mantenga el envase cerrado / Verpakking gesloten houden / Conservare la confezione chiusa / Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
	Ausreichend für <n> Prüfungen / Contains sufficient for <n> tests / Contenu suffisant pour <n> tests / Contenido suficiente para <n> tests / Voldoende voor <n> tests / Contenuto sufficiente per <n> test / Wystarczająco dla kontroli <n>		